

2026

pH標準液の新常識

使い切りなら無駄なく
信頼性の高い校正を実現！



写真はイメージ。
自立はしません。


✓ 安心、手間いらず



使い切りタイプの多くは有効期限が4年以上(pH10は約2年)開封後の期限や劣化を気にせず常に信頼性の高い標準液を使えます。

希釈せずにそのまま使えるためビーカーに注ぐ手間はありません。持ち運びもラクで、現場使用にもぴったりです！

✓ 信頼のテクニカルタイプ

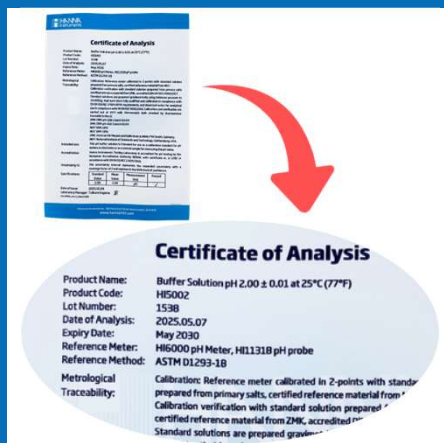

ハンナの標準液はNISTトレーサブルです。証明書付きは製造施設での分析証明書が付属。さらにテクニカルタイプならより高い信頼性が確保されています。

※テクニカルタイプ：DIN EN ISO/IEC 17025 に基づき認定された試験所において認定範囲内の方法で測定された標準液
※証明書は英文です。
※NISTは米国国立標準技術研究所の国際的な規格です。
※詳細は次頁を参照

✓ 世界一のラインナップ!?



pH1.00～pH13.00までの間で全18種類の標準液を取り揃えており、カスタム校正に幅広く対応できます。これにより、お客様の測定試料のpH値に近いポイントで校正ができ、精度・信頼性・反応速度を最大限に高めることが可能です。



ハンナのpH標準液がすごい理由とは？
詳細はこちら

80種類以上！多種多様なpH標準液



(20ml x 25袋入り)

1回使い切りパックタイプ

	品番	証明書付き ※2	テクニカル ※1	価格
pH 1.00	HI 50001-02	●	●	10,000 円
pH 1.68	HI 50016-02	●	●	9,500 円
pH 2.00	HI 50002-02	●	●	10,000 円
pH 3.00	HI 50003-02	●	●	9,500 円
pH 4.01	HI 70004P			7,200 円
	HI 70004C	●		8,500 円
	HI 50004-02	●	●	10,000 円
pH 5.00	HI 50005-02	●	●	10,000 円
pH 6.00	—			
pH 6.86	HI 70006P			7,200 円
	HI 70006C	●		8,500 円
	HI 50068-02	●	●	10,000 円
pH 7.01	HI 70007P			7,200 円
	HI 70007C	●		8,500 円
	HI 50007-02	●	●	10,000 円
pH 7.41	—			
pH 8.00	—			
pH 9.00	HI 50009-02	●	●	10,000 円
pH 9.18	HI 70009P			7,200 円
	HI 70009C	●		8,500 円
	HI 50091-02	●	●	10,000 円
pH 10.01	HI 70010P			7,200 円
	HI 70010C	●		8,500 円
	HI 50010-02	●	●	10,000 円
pH 11.00	HI 50011-02	●	●	10,000 円
pH 12.00	HI 50012-02	●	●	10,000 円
pH 12.45	HI 50124-02	●	●	10,000 円
pH 13.00	HI 50013-02	●	●	10,000 円

500mlボトルタイプ

	品番	証明書付き ※2	テクニカル ※1	価格
	HI 5001	●	●	6,600 円
	HI 5016	●	●	6,600 円
	HI 5002	●	●	6,600 円
	HI 5003	●	●	6,600 円
	HI 7004L			3,000 円
	HI 7004L/C	●		5,500 円
	HI 5004	●	●	6,600 円
	HI 5005	●	●	6,600 円
	HI 5006	●	●	6,600 円
	HI 7006L			3,000 円
	HI 7006L/C	●		5,500 円
	HI 5068	●	●	6,600 円
	HI 7007L			3,000 円
	HI 7007L/C	●		5,500 円
	HI 5007	●	●	6,600 円
	HI 5074	●	●	6,600 円
	HI 5008	●	●	6,600 円
	HI 5009	●	●	6,600 円
	HI 7009L			3,000 円
	HI 7009L/C	●		5,500 円
	HI 5091	●	●	6,600 円
	HI 7010L			3,000 円
	HI 7010L/C	●		5,500 円
	HI 5010	●	●	6,600 円
	HI 5011	●	●	6,600 円
	HI 5012	●	●	6,600 円
	HI 5124	●	●	6,600 円
	HI 5013	●	●	6,600 円

※1 テクニカルとは：

DIN EN ISO/IEC 17025 に基づき認定された試験所において認定範囲内の方法で測定された標準液

※2 証明書付き、テクニカルとともに英文証明書が同梱されています。

英文証明書はすべて製造時に作成されたもので、日本語での発行は行えません。

※ 使い切り、500mlボトルタイプの他に230mlや1Lなどもあります。

※ 上記の金額は2026年2月時点での税抜価格です。
価格は予告なく変更になる場合がございます。



pH標準液の一覧ページ
はこちら！

pH電極のメンテナンスガイド

校正

標準液を使用し測定器の数値のズレを正すこと

校正頻度の目安は？

- ✓ 週3日以上測定する場合、
少なくとも1週間に1回
- ✓ 月に数回測定する場合、
その日の測定前

標準液の選び方

ボトルタイプの有効期限は開封後3ヶ月です。(※一部を除く) 精度や信頼性を求める方、使用頻度が少ない方には、使い切りタイプがオススメ。

洗浄

目には見えない汚れや付着物を除去すること

水洗いだけでは落ちません！

強い洗浄力を持つ電極洗浄液に浸け置きすることで汚れを除去し、電極の消耗・劣化を最小限に抑えます。

洗浄頻度の目安は？

- ✓ 週3日以上測定する場合、
少なくとも1週間に1回
- ✓ 月に数回測定する場合、
その日の測定後

保管

保存液で電極の乾燥を防ぐこと

使わなくてもpH計は劣化する!?

電極は長く乾燥させると劣化します。そのため使用後や使わない時には電極保存液での保管が大切です。

精製水や水道水はNG！

精製水や水道水に長時間浸けると、浸透圧により、安定性が低下します。電極保存液は電極内部液に近い成分のため安心です！



pHメンテナンスガイド
をご覧ください。

多彩な標準液と組み合わせて使いたいpH計

HALO2



卓上型に匹敵する精度・性能を備えた ポケットサイズのpHテスター

- ✓ 用途別に15種類！
(ラボ、強酸/強塩基、化粧品、土壌突き刺し、食品、ワインなど)
- ✓ ラボ向けなら5点校正可能！精度±0.02pH
- ✓ Bluetooth接続してデータの
保存や転送も簡単！



QRコードを読み取ると…
製品の詳細ページをご覧ください。

2026年
NEW

卓上型pH/EC/DO計 Core Model Plus (コアモデルプラス)



圧倒的なコストパフォーマンス

2026年1月新発売


価格

HI 2600-01(pH/EC/DO)	99,000 円
HI 2620-01(pH/ログなし)	70,000 円
HI 2621-01(pH/ログあり)	90,000 円




＼卓上型EC、DO計モデルもあります／
QRコードを読み取ると…
製品の詳細ページをご覧ください。

✓ カスタム校正

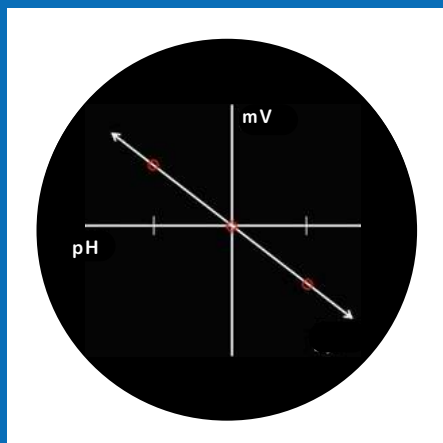

任意の校正ポイントを選べるのがカスタム校正です。測定試料のpH値に近いところで校正することで精度、信頼性、反応速度が高められます。 HannaではpH1~13の全18種類の標準液からカスタム校正を行えます。(5点校正まで可能)

✓ 電極の状態が見える

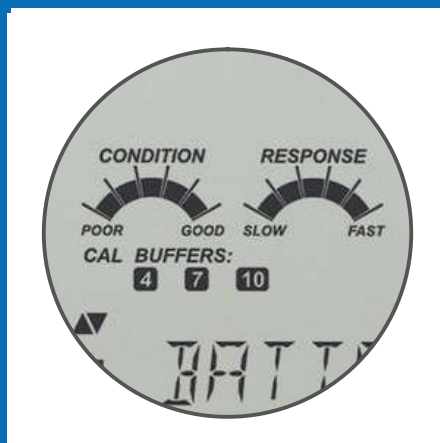

pH校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。ゲージはpH電極のオフセット/スロープ特性に基づいています。これによりpH電極の状態を把握し電極のメンテナンスや交換時期の判断に役立ちます。

✓ 11種類のpH電極



大学やラボのほか、食品／飲料、工業、農業／水耕栽培、ワイナリーなど多くの業界で幅広い用途に対応！
(上記3製品ともに購入時にはラボ向け／汎用が付属)

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL : 043-216-2601

Email : sales@hanna.co.jp



※上記の金額は2026年2月時点での税抜価格です。
価格は予告なく変更になる場合がございます。