

2026年
NEW

卓上型pH/EC/DO計 Core Model Plus

(コアモデルプラス)



圧倒的なコストパフォーマンス

2026年1月新発売


価格

HI 2600-01(pH/EC/DO)	99,000 円
HI 2620-01(pH/ログなし)	70,000 円
HI 2621-01(pH/ログあり)	90,000 円




＼卓上型EC、DO計モデルもあります／
QRコードを読み取ると…
製品の詳細ページをご覧ください。

✓ カスタム校正

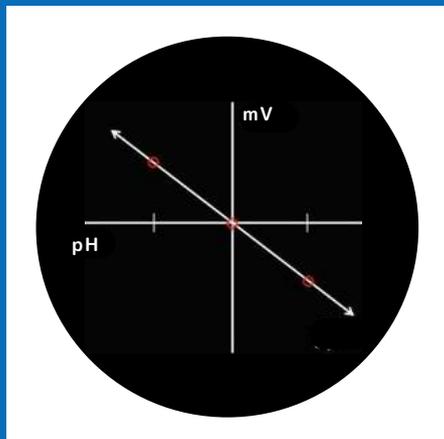

任意の校正ポイントを選べるのがカスタム校正です。測定試料のpH値に近いところで校正することで精度、信頼性、反応速度が高められます。 HannaではpH1~13の全18種類の標準液からカスタム校正を行えます。(5点校正まで可能)

✓ 電極の状態が見える

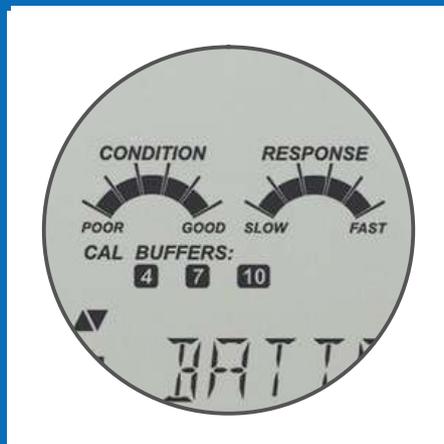

pH校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。ゲージはpH電極のオフセット/スロープ特性に基づいています。これによりpH電極の状態を把握し電極のメンテナンスや交換時期の判断に役立ちます。

✓ 11種類のpH電極



大学やラボのほか、食品/飲料、工業、農業/水耕栽培、ワイナリーなど多くの業界で幅広い用途に対応！
(上記3製品ともに購入時にはラボ向け/汎用が付属)

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL : 043-216-2601

Email : sales@hanna.co.jp



※上記の金額は2026年2月時点での税抜価格です。
価格は予告なく変更になる場合がございます。